



PANTHERA™ FUSION BAR



Une forme et une fonction conçues sur la base de la science dentaire.



700+
plateformes

Compatibilité
d'implants inégalée.

25
ANS

Garantie de 25 ans sur
la barre sur implants.

Avantages de la barre

30% PLUS RÉSISTANT

Les tests en porte-à-faux ont montré que la résistance à la fracture de la zircone soutenue par une barre sur implants en titane était 30 % plus élevée que celle de la zircone non soutenue¹.

PROFIL BAS DE LA BARRE

Peu ou pas de réduction osseuse nécessaire.

CONTOURS ARRONDIS AU SOMMET DE LA BARRE

Évite les points de pression à angle aigu.

CONCEPTION PENSÉE POUR L'HYGIÈNE

Conçue avec précision pour respecter toutes les caractéristiques de votre patient.

CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIAU

Zircone ou PMMA, multi-layer ou monochrome. Choisissez le matériau qui répond le mieux aux besoins de vos patients.



WWW.PANTHERADENTAL.COM

N'hésitez pas à contacter notre équipe support.

INFO@PANTHERADENTAL.COM | 1.418.527.0388




1. Ces tests ont été effectués en interne par Panthera Dental en utilisant les protocoles et la méthodologie standard de l'industrie.




PANTHERA™ FUSION BAR



Deux profils de barres innovants, conçus pour supporter
tous les types de prothèses fixes.

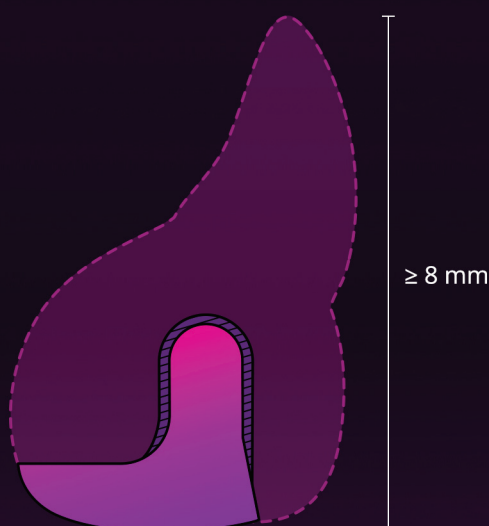

PFB^{MC}

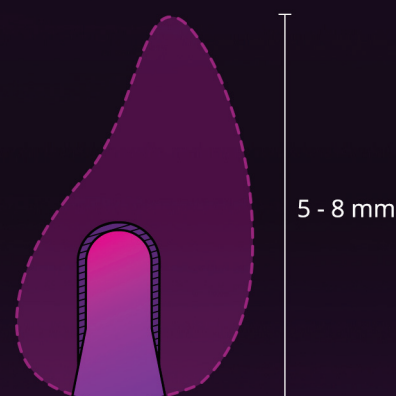

PFB^{MC} Bridge

PF2-PF3	Type de prothèse	PF1-PF2
min. 5 mm	Profil bas de la barre	min. 3.6 mm
Buccal	Chanfrein de 10°	Dual : buccal et lingual
✓	Assise linguale de 90°	
✓	Espace constant de ciment de 100 microns	✓
✓	Positionnement exact de l'assise vertical	✓
✓	Fit précis de l'overlay sur la barre	✓
✓	Ligne de transition basse	✓
✓	Canaux de vissage angulés	✓



WWW.PANTHERADENTAL.COM

N'hésitez pas à contacter notre équipe support.

INFO@PANTHERADENTAL.COM | 1.418.527.0388






PANTHERA™ FUSION BAR



TRAVAILLEZ À VOTRE FAÇON ! Rapidité d'exécution - Simple comme 1,2,3.

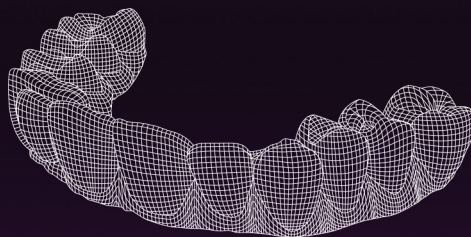

WORKFLOW DIGITAL SYNCHRONISÉ

- 1** Panthera crée le design de la barre dans le montage de dents et vous envoie le fichier STL de l'overlay.
- 2** Pendant que Panthera usine la barre, vous pouvez simultanément fraiser l'overlay en zircone ou en tout autre matériau.
- 3** Vous recevez la barre, vous la cimentez avec votre overlay caractérisé et voilà !



SERVICE D'USINAGE DE LA BARRE ET DE LA ZIRCONÉ

- 1** Panthera crée le design de la barre dans le montage de dents.
- 2** Panthera usine la barre et l'overlay en zircone.
- 3** Vous recevez la barre et l'overlay, vous caractérisez votre overlay, les cimentez ensemble et voilà !



WWW.PANTHERADENTAL.COM

N'hésitez pas à contacter notre équipe support.

INFO@PANTHERADENTAL.COM | 1.418.527.0388






PANTHERA™ FUSION BAR



Workflow digital synchronisé

Le premier protocole de fractionnement qui permet le fraisage de l'overlay en laboratoire pendant que Panthera usine la barre sur implants.

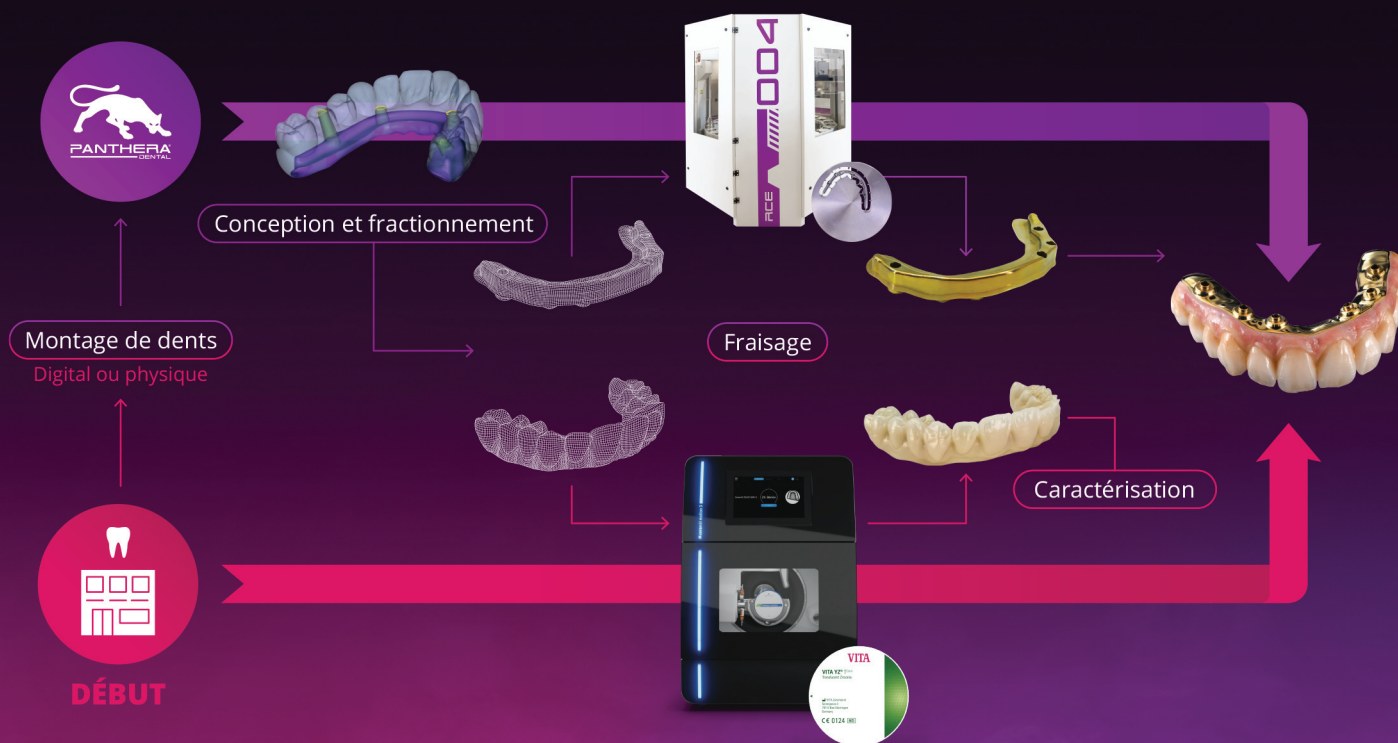

WWW.PANTHERADENTAL.COM

N'hésitez pas à contacter notre équipe support.

INFO@PANTHERADENTAL.COM | 1.418.527.0388

